

# Serene

pump



Manual de usuario

## Wearable Breast Pump

## 01 | Características

### **4 Modos y 9 Niveles**

Las madres pueden probar diferentes modos (modo multitrónico, modo de masaje, modo express y modo de simulación de succión) y niveles del 1 al 9 para seleccionar la mejor manera de extraer leche.

### **Bajo ruido**

El extractor de leche eléctrico está fabricado con un mejor diseño y mano de obra. El ruido es de solo 40 dB.


### **Portátil**

Es liviano y cabe en el sujetador, la batería de litio recargable le permite extraer leche en cualquier lugar y en cualquier momento.



## 02 | Partes

Limpie y desinfecte las piezas utilizadas en contacto con alimentos antes y después de cada uso.

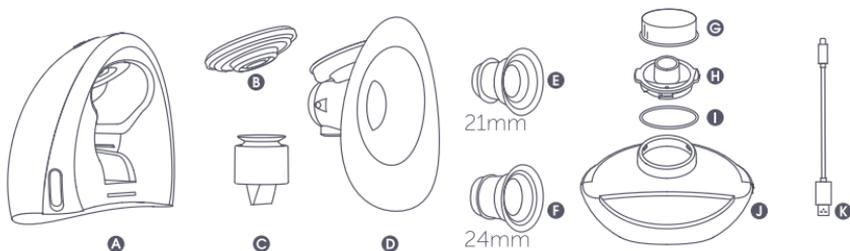

• La imagen es sólo para referencia, el producto está sujeto a cambios.

Advertencia: si alguno de los componentes está dañado o falta, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Nombre del componente	Materiales	Temperatura de funcionamiento
<b>A</b> Motor	/	/
<b>B</b> Cilindro	Silicona	-20°C/-4°F ~ 200°C/392°F
<b>C</b> Válvula de pico de pato	Silicona	-20°C/-4°F ~ 200°C/392°F
<b>D</b> Cuerpo de bomba	PP	-20°C/-4°F ~ 120°C/248°F
<b>E</b> Inserto de brida de 21 mm	Silicona	-20°C/-4°F ~ 200°C/392°F
<b>F</b> Inserto de brida de 24 mm	Silicona	-20°C/-4°F ~ 200°C/392°F
<b>G</b> Tapa de almacenamiento	PP	-20°C/-4°F ~ 120°C/248°F
<b>H</b> Tapa de botella de leche	PP	-20°C/-4°F ~ 120°C/248°F
<b>I</b> Anillo de silicona para botella de leche	Silicona	-20°C/-4°F ~ 200°C/392°F
<b>J</b> Botella de leche	PCT	-20°C/-4°F ~ 100°C/212°F
<b>K</b> Cable de carga	/	/
Instrucciones	/	/




## 03 | Montaje de Serene Pump


Lávese las manos antes de ensamblar el extractor de leche y asegúrese de limpiar y desinfectar las piezas esterilizadas antes de usarlo.




1. Coloque el cilindro en el cuerpo de la bomba.

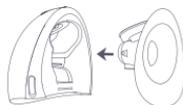

2. Empuje el cuerpo de la bomba dentro del motor.

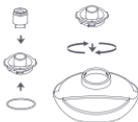

3. Inserte la válvula de pico de pato en la tapa de la botella de leche y coloque el anillo de silicona de la botella de leche en el parte inferior de la tapa de la botella de leche. Luego fije la leche tapa de la botella a la botella de leche y gírela para el punto.

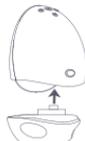

4. Instale la botella de leche en la parte inferior del motor y escuchar un clic.




5. Inserte el lado pequeño del enchufe del cable en el conector tipo C del motor y luego conecte el puerto USB al banco de carga, computadora o conéctelo a la toma de corriente a través del adaptador (adaptador de 5V/1A).



6. La cantidad de leche en el biberón no debe exceder la capacidad máxima del biberón. Si alcanza la capacidad máxima, apague el extractor de leche inmediatamente. Reemplace el biberón y continúe bombeando.



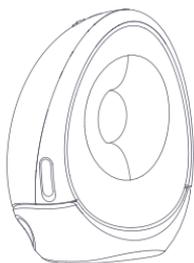


Mida el tamaño de su pezón y elija el tamaño de brida que mejor se adapte a sus necesidades.

En la caja se incluyen insertos de brida de 21 mm/24 mm. El cuerpo original de la bomba es de 28 mm.

## Instalación



1. Presione el botón de la botella y saque la botella.

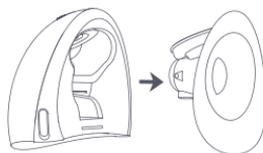

2. Saque el cuerpo de la bomba del motor.

### Recordatorio amistoso:

Después de la succión, retire el biberón de leche y colóquelo la tapa. Limpie la máquina con una toalla seca. Lave y seque otras partes para evitar que la leche se pegue a ellas. Si no necesita alimentar a su bebé inmediatamente, conserve la leche materna en la nevera.


No llene el biberón con demasiada leche, no puede pasar la capacidad máxima de 3 oz / 90 ml. Si hay demasiada leche, la leche fluirá hacia el cuerpo del extractor. En este caso, apague la máquina, reemplace el biberón o vierta leche a otros recipientes.

Nota:

Este extractor de leche se apagará automáticamente después de funcionar 30 minutos.



## 05 | Uso de Serene Pump

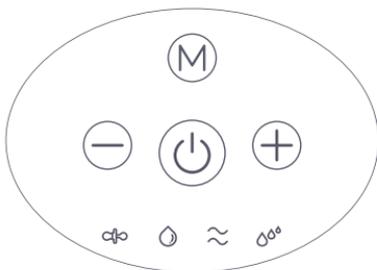

1. Asegúrese de que todas las piezas del extractor de leche estén esterilizadas y siga las instrucciones para instalarlo correctamente antes de su uso.

2. Lávese las manos y use una toalla húmeda y caliente para masajear su seno antes de usarlo.

3. Después del masaje, siéntese derecho e inclínese un poco hacia adelante (NO PUEDE acostarse, NO PUEDE inclinar el extractor de leche), deje que el centro de la brida alinee el pezón y se adhiera al pecho para asegurarse de que no permita la entrada de aire y La potencia de succión es regular.

4. Mantenga presionado el botón de inicio para ajustar el modo de succión del seno y el equipo según su comodidad.

Funciones de botones		
	Encender/apagar	Mantenga presionado para encender/apagar. Presione brevemente para pausar. La bomba se apagará automáticamente después de una pausa de más de 10 minutos.
	Cambio de modo	Presione brevemente para cambiar de modo
	Interruptor de nivel	Aumente o disminuya el nivel de succión, los números 1 ~ 9 muestran diferentes niveles de succión
Instrucción de visualización		
	Modo multitónico	Cinco veces succión ligera más un bucle de succión pesado
	Modo masaje	Cambio automático de 1 a 5 niveles de succión. Es necesario cambiar manualmente de 6 a 9 niveles.
	Modo expreso	Bucle de succión normal
	Chupar modo simulado	Dos succiones cortas - una succión larga - tres succiones cortas - Dos bucles de succión largos.



## 06 | Solución de problemas

### Muy poca o ninguna succión

- Compruebe si todos los componentes están instalados correctamente.
- Compruebe si el centro del reborde se alinea con el pezón y se adhiere a los senos, asegúrese de que no entre aire.

## Condiciones de trabajo

- Rango de temperatura nominal: 5 °C/41 °F a 40 °C/104 °F.
  - Humedad relativa nominal: 20%-80%.
  - Presión atmosférica nominal: 850 Hpa - 1060 Hpa.
- El almacenamiento a largo plazo debe mantenerse en un lugar seco y fresco.

## Transporte y almacenamiento

- Al extraer leche, debe mantener la postura correcta, no se recueste de lado en caso de que salga leche.



- Temperatura: -20 °C/-4 °F a 55 °C/131 °F
- Humedad: 20% - 80%
- Presión atmosférica: 850Hpa - 1060Hpa



Después de la limpieza y desinfección, la succión, el cilindro debe secarse antes de usar.




## 07 | Almacenamiento de la leche materna



### Formas de almacenar la leche materna

1. Puede almacenar la leche materna en el refrigerador durante 48 horas a aproximadamente 4°C/39,2°F.
2. Al congelar la leche materna, deje espacio en la parte superior del biberón.

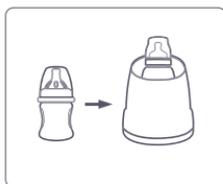

### Para calentar la leche

1. Para preservar la nutrición de la leche materna, puede calentar la leche materna con agua tibia a 40°C/104°F o usar un calentador.
2. No descongele la leche materna congelada en el horno microondas ni en agua hirviendo (dañará la nutrición de la leche materna).

## Instrucciones de esterilización

Componentes	Instrucción de esterilización
Motor Cable de carga	No se puede lavar ni desinfectar, si la superficie está sucia limpiarla con un paño suave.
Tapa de botella de leche Botella de leche Cuerpo de bomba	Están hechos de plástico y se pueden enjuagar o lavar en lavavajillas (temperatura no puede exceder los 100 °C/212 °F). Después de la limpieza, puede desinfectarlos con vapor. Esterilizador, esterilizador ultravioleta, horno microondas (ponga las piezas desinfectantes en un recipiente desinfectante o una bolsa desinfectante) o agua hirviendo (la cantidad de agua no puede ser inferior a las piezas desinfectadas, y las piezas desinfectadas no pueden tocar directamente el fondo de la olla o los bordes metálicos).
Cilindro Válvula pico de pato Inserto de brida Anillo de silicona	Están hechos de silicona y son frágiles. Enjuáguelos suavemente al limpiarlos. No son aptos para frotar y desinfectar a alta temperatura durante mucho tiempo. De lo contrario podría provocar un rápido envejecimiento o deformación, lo que afectará al uso.



## 08 | Clasificación de seguridad

Deseche adecuadamente el dispositivo de acuerdo con las normas locales, Normas estatales y federales.

Clasificación de seguridad.

- Tipo de protección contra descargas eléctricas: Equipo motorizado.
- Grado de protección contra descargas eléctricas: Tipo BF parte aplicada.
- Grado de seguridad de uso en gas anestésico inflamable.

Mezclado con aire, oxígeno u óxido nítrico: No AP/APG.

- Funcionamiento continuo o no continuo: Continuo.
- Clasificación de los métodos de esterilización: No hay necesidad de esterilización.



## Precauciones

1. Lea atentamente el manual antes de usarlo.
2. Cargue completamente el producto antes del primer uso. No cargue la batería durante mucho tiempo. Las baterías de litio solo pueden ser reemplazadas por Serene o proveedores de servicios autorizados, y reemplazar el modelo de batería incorrecto tendrá peligro de explosión. Deseche las baterías de desecho bajo las leyes y regulaciones locales.
3. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, la batería se agotará. Es necesario enchufarlo para reactivarlo. Después de enchufarlo, espere diez minutos hasta que la pantalla se encienda para indicar que se ha activado. Luego continúe cargando el producto hasta que esté completamente cargado. Si no se activa durante más de media hora, consulte con el servicio de atención al cliente.
4. El motor de la bomba y otras piezas eléctricas **NO SE PUEDEN lavar en agua ni esterilizar en un esterilizador a vapor.**
5. Después de la esterilización del gel de sílice de succión, seque la humedad del gel de sílice de succión antes de usarlo.
6. Cuando el símbolo de la batería muestra que la rejilla única parpadea después del inicio, indica que la energía es insuficiente. Cárguela a tiempo.
7. Utilice el cable de carga proporcionado con este producto. No conecte el cable de carga de ningún otro fabricante al host para su uso, para no causar daños al host.
8. Utilice un adaptador de CC, seleccione el adaptador con voltaje de entrada AC100-240V y salida DC 5V y 1A.
9. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.



## 09 | Fuente de energía y carga

### **Método de suministro de energía**

Fuente de alimentación del adaptador: cuando lo utilice, inserte el adaptador en la toma de corriente, asegúrese de que esté en su lugar, mantenga presionado el botón de encendido para encenderlo, presione brevemente el botón de encendido para apagarlo y elija el modo y el nivel de succión según a tu comodidad.

### **Fuente de alimentación de batería de litio**

Este producto tiene una batería de litio en su interior. Al usarlo, mantenga presionado el botón de encendido para encenderlo. Presione brevemente el botón de encendido para apagarlo (cuando la batería esté activa), elija el modo y el nivel de succión. según su comodidad. Cuando el símbolo de la batería parpadea, significa que la energía es baja, cárguela a tiempo.

### **Método de carga**

Al cargar, conecte el adaptador a la toma de corriente y asegúrese de que esté en su lugar. Al cargar, debe estar apagado. No se cargará en el estado encendido. Durante el proceso de carga, el símbolo de encendido La luz parpadea. Cuando el símbolo de la batería esté estable y brillante, la batería está llena. Desenchufe la alimentación.



## Tarjeta de garantía

Gracias por comprar nuestro producto. Por favor mantenga su recibo como prueba de compra para cualquier reclamo de garantía.

Para reclamos y soporte de garantía, envíe un SMS al +(593)96 9366 004, o envíenos un correo electrónico a [serene.maternity.ec@gmail.com](mailto:serene.maternity.ec@gmail.com)

También puede visitar nuestro sitio web [www.serene.ec](http://www.serene.ec) para obtener más información.

Nombre		Teléfono	
Nombre del producto		Modelo	
Fecha de compra			
DIRECCIÓN			

1. Este producto viene con 1 AÑO de garantía. Comuníquese con el FABRICANTE para reclamos de garantía.

2. Esta garantía no cubre defectos causados por: mal uso, abuso, almacenamiento/alteración inadecuado del producto, uso de componentes inadecuados, incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento utilizando los accesorios suministrados con el producto o desgaste normal.

3. El usuario de este producto asume toda la responsabilidad y riesgo por el uso de este producto.

4. ADVERTENCIA: No se permite ninguna modificación de este equipo



7



# Serene pump

[www.serene.ec](http://www.serene.ec)



[@serene.maternity](https://www.instagram.com/serene.maternity)